



CATÁLOGO DE PRODUCTO

 **CO** *IMPLANTES DE*
CONEXIÓN CÓNICA

Tree•Oss
Dental Implant System

Tree•Oss CO

ESTABILIDAD BIOMECÁNICA A LARGO PLAZO

CONEXIÓN CÓNICA


Los implantes **Tree•Oss® CO** poseen una innovadora conexión cónica que brinda un ajuste perfecto sellando completamente el contacto entre implante y pilar.

Este sellado asegura una absoluta solidez biomecánica, aumentando la estabilidad de los tejidos y reduciendo al mínimo la posibilidad de aflojamiento de tornillos o pérdida ósea a nivel cervical.

Con **Tree•Oss® CO** asegure un tratamiento confiable, sólido y eficaz a largo plazo. Aumente la estabilidad de los tejidos y mejore el resultado estético para sus pacientes.

CONEXIÓN CÓNICA DE 8 GRADOS POR LADO

Garantiza un ajuste sólido y permanente a largo plazo reduciendo al mínimo la posibilidad de aflojamiento de tornillos.

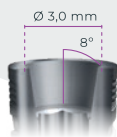


PLATFORM SWITCH Y CONO MORSE

Aseguran un sellado perfecto disminuyendo casi por completo la posibilidad de focos inflamatorios que impacten en la estabilidad




CONEXIÓN PROFUNDA Y HEXÁGONO INTERNO

Proporciona una base estable, estética y firme para rehabilitaciones, incluso en implantes colocados bajo el reborde óseo.

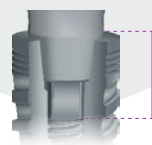

CONEXIÓN UNIFICADA PARA TODOS LOS DIÁMETROS

Una única conexión en todos los diámetros, simplificando al máximo las rehabilitaciones. CAD/CAM integrado.

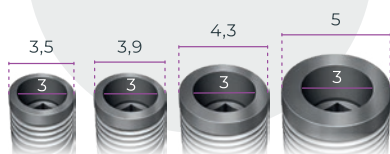

EMERGENCIA ANGOSTA


Nacimiento en 3mm de diámetro con diferentes alturas de cuello y diseño cóncavo. Versatilidad y estética en todos los casos.



NUESTROS *IMPLANTES CÓNICOS*

Solidez - Estabilidad - Biomecánica - Estética

HS

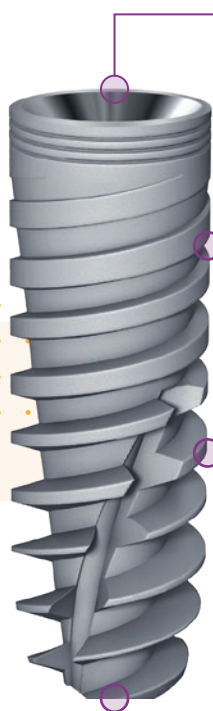

Conexión cónica unificada para todos los diámetros con hexágono interno.

Asegura un sellado perfecto y permanente a largo plazo. Brinda las bases para una emergencia firme, inmóvil y estética.

Tratamiento superficial hasta arriba y microsurcos en el cuello.

Mantiene al máximo el nivel de hueso cervical proporcionando el soporte ideal para un excelente resultado estético.

Doble espira gradual y cuerpo cónico.

Mayor estabilidad en menor tiempo de colocación. Compresión y anclaje mecánico que garantizan una alta estabilidad inicial incluso en huesos blandos, regeneraciones y casos post extracción.

Ápice autoperforante con espiras filosas y cuerpo angosto.

Permite ajustar la orientación del implante durante su colocación.

ANATOMIC

Conexión cónica unificada para todos los diámetros con hexágono interno.

Asegura un sellado perfecto y permanente a largo plazo. Brinda las bases para una emergencia firme, inmóvil y estética.

Tratamiento superficial hasta arriba


Mantiene al máximo el nivel de hueso cervical proporcionando el soporte ideal para un excelente resultado estético.


Diseño anatómico y cónico imitando la raíz natural

Brinda la capacidad de adaptarse a todas las limitaciones anatómicas. Garantiza una alta estabilidad inicial incluso en huesos blandos, regeneraciones y casos post extracción.

Ápice angosto

Facilita la correcta alineación protética y axialidad de las cargas, ampliando el ángulo de posiciones posibles.

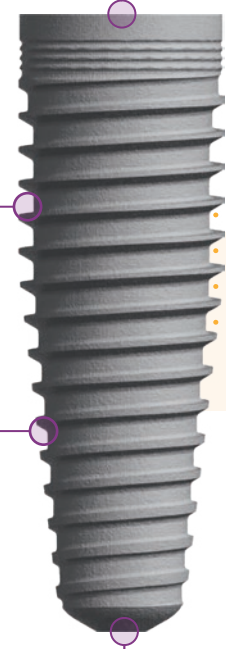

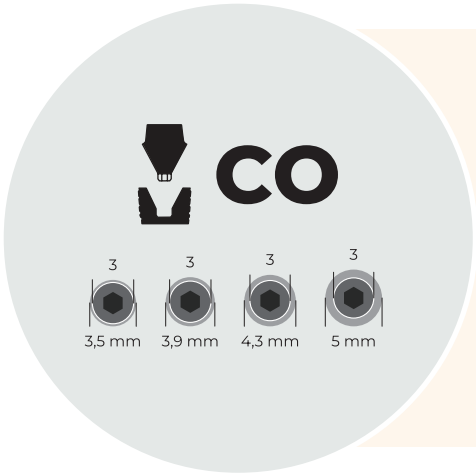


Conexión cónica unificada con hexágono interno.
Asegura un sellado perfecto y permanente a largo plazo.

Conexión cónica de 8 grados por lado.
Brinda las bases para una emergencia firme, inmóvil y estética.


Plataform switch y cono morse.
Disminuye la posibilidad de focos inflamatorios que impacten en la estabilidad biológica de los tejidos.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	Ø D (mm)	Ø ÁPICE	LARGO	REFERENCIA
HS CO Implante espiral autoperforante de alta estabilidad inicial.  Ø: 3,5 - 3,9 - 4,3 - 5 L: 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15	Espiras agresivas y cuerpo cónico. Compresión y anclaje mecánico que garantizan una alta estabilidad inicial incluso en huesos blandos, regeneraciones y casos post extracción. Ápice autoperforante con espiras filosas y cuerpo angosto. Permite ajustar la orientación durante su colocación. Doble espira gradual. Mayor estabilidad en menor tiempo de colocación.	3,5	cuerpo - espira 1,6 - 2,8	8,5 10,0 11,5 13,0 15,0	IHS3508/5M IHS3510/5M IHS3511/5M IHS3513/5M IHS3515/5M
		3,9	1,8 - 2,9	8,5 10,0 11,5 13,0 15,0	IHS3908/5M IHS3910/5M IHS3911/5M IHS3913/5M IHS3915/5M
		4,3	2,1 - 3,2	8,5 10,0 11,5 13,0 15,0	IHS4308/5M IHS4310/5M IHS4311/5M IHS4313/5M IHS4315/5M
		5,0	2,5 - 3,6	8,5 10,0 11,5 13,0 15,0	IHS5008/5M IHS5010/5M IHS5011/5M IHS5013/5M IHS5015/5M
ANATÓMICO CO Implante cónico que imita la raíz natural  Ø: 3,5 - 4,3 - 5 L: 8 - 10 - 11,5 - 13 - 16	Diseño imitando la raíz natural. Brinda la posibilidad de adaptarse a cualquier limitación anatómica. Cuerpo cónico compresivo. Garantiza una alta estabilidad inicial incluso en huesos blandos, regeneraciones y casos post extracción. Ápice angosto. Facilita la correcta carga axial y alineación protésica ampliando el ángulo de posiciones posibles.	3,5	2,2	8,0 10,0 11,5 13,0 16,0	IA3508/5M IA3510/5M IA3511/5M IA3513/5M IA3516/5M
		4,3	2,7	8,0 10,0 11,5 13,0 16,0	IA4308/5M IA4310/5M IA4311/5M IA4313/5M IA4316/5M
		5,0	3,3	8,0 10,0 11,5 13,0 16,0	IA5008/5M IA5010/5M IA5011/5M IA5013/5M IA5016/5M

MEDIDAS TÉCNICAS

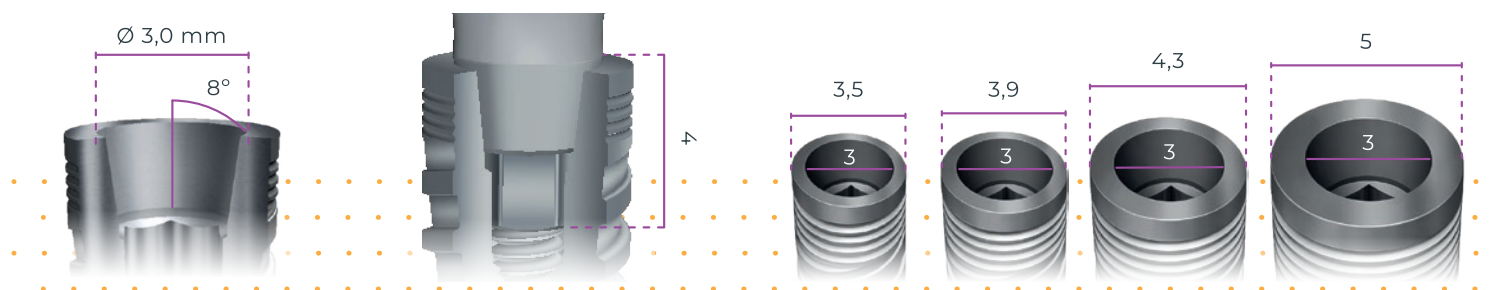


HS CO

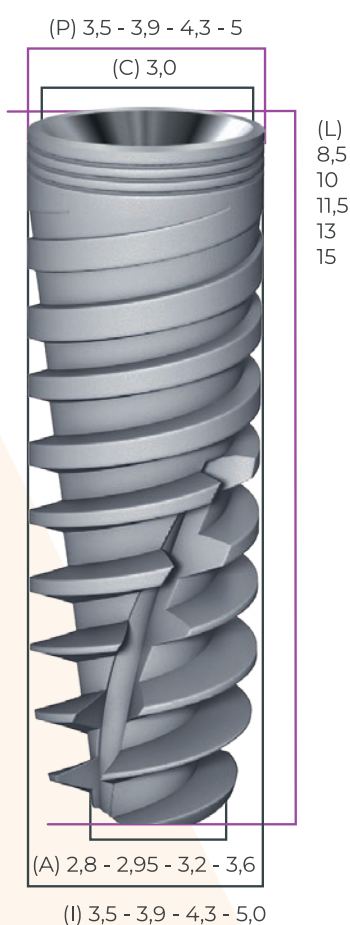

(P) Plataforma
(C) Conexión
(L) Largo
(A) Ápice
(I) Implante

ANATOMIC CO

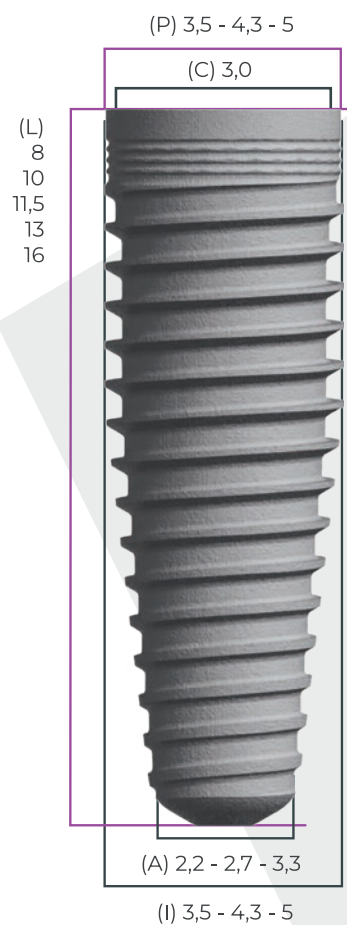

Todos los implantes **Tree-Oss®** cuentan con **garantía de oseointegración**. Profesionales de distintos países colaboran en la investigación constante sobre nuestros productos. Odontólogos referentes y estudios clínicos y científicos proveen información de vital importancia para el **desarrollo de mejoras e innovaciones**.



Tree-Oss ENVASES


Nuevo packaging




Todos los modelos de implantes **Tree-Oss®** cuentan con el mismo sistema de envasado "listo para colocar" lo que unifica y simplifica los procedimientos quirúrgicos. Cada implante **Tree-Oss®** es envasado en un sistema de doble cápsula, ofreciéndole una absoluta seguridad y comodidad en la colocación.

SISTEMA CON MONTURA

ENVASE SECUNDARIO

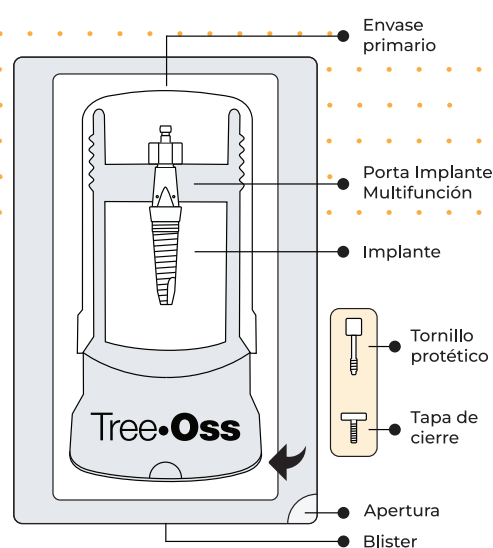


PILAR MULTIFUNCIÓN

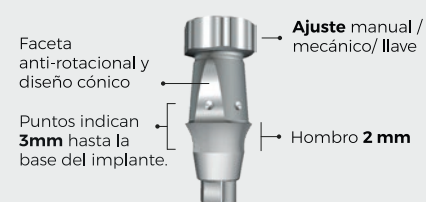

Porta/ Impresión




Pilar/ Ti-Base

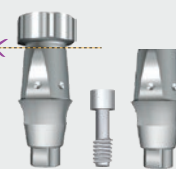

CAD/CAM
Librería en:
tree-oss.com/descargas

*Tornillo protésico incluido en el envase

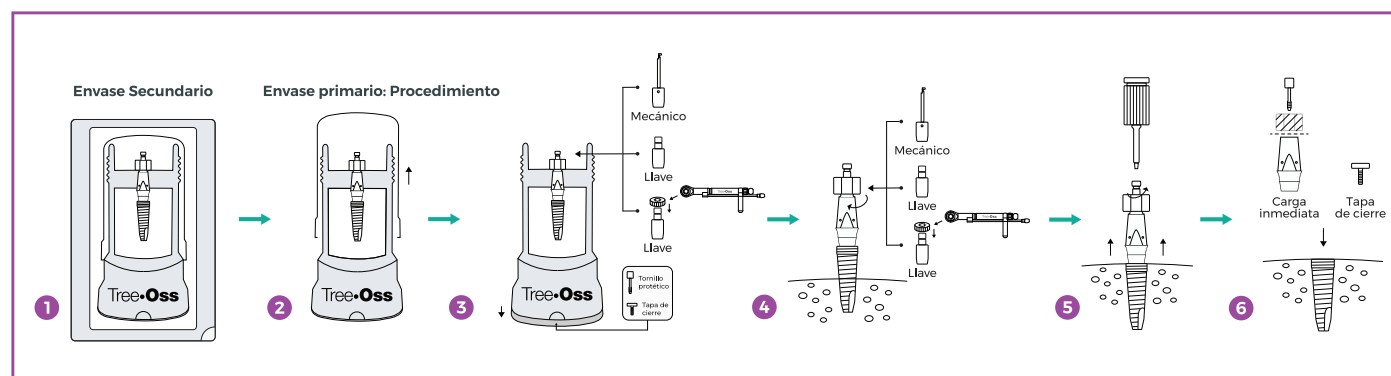

SISTEMA MOUNTLESS (SIN MONTURA)

Innovación en el Flujo Quirúrgico:

Como otra opción también contamos con el sistema sin montura. Ha sido diseñado para optimizar la visibilidad durante la cirugía, eliminando obstáculos visuales y garantizando una transferencia estéril y simplificada directamente al lecho óseo.



Seguridad y precisión

Para asegurar la máxima protección, el implante se encuentra alojado en un tubo de envase primario de alta resistencia, el cual actúa como la barrera estéril final. Al prescindir de una montura pre-ensamblada, se elimina la necesidad de pasos adicionales para retirar componentes intermedios. Esta simplificación agiliza el flujo de trabajo quirúrgico.


Control Táctil y Estabilidad Primaria

Desde el punto de vista biomecánico, la ausencia de montura ofrece una ventaja crítica: permite que el torque de inserción se transmita de manera directa y uniforme a la conexión interna del implante. Esto maximiza la sensación táctil del profesional durante el roscado, permitiendo un control preciso de la resistencia ósea y asegurando, en consecuencia, una estabilidad primaria óptima.

ENVASE SECUNDARIO

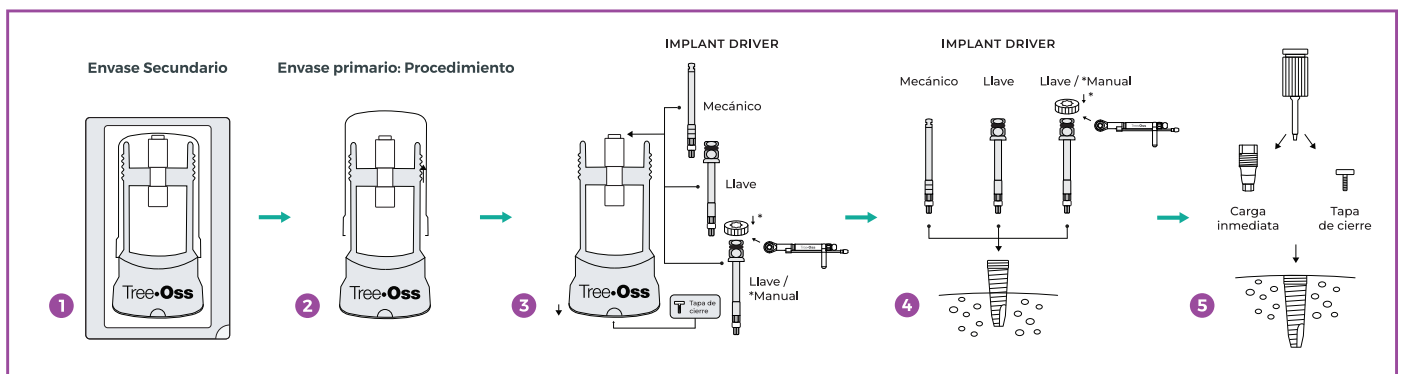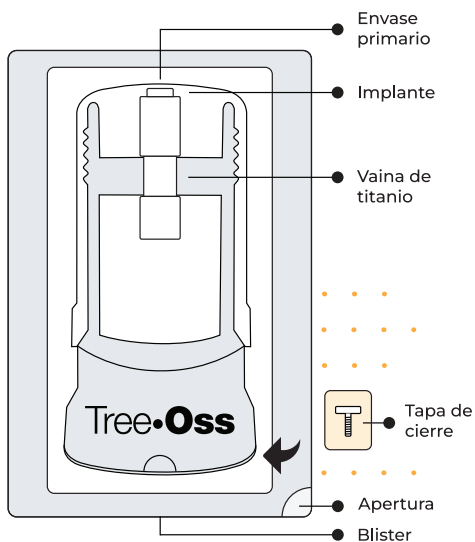

Tree•Oss SUPERFICIE OXALIFE

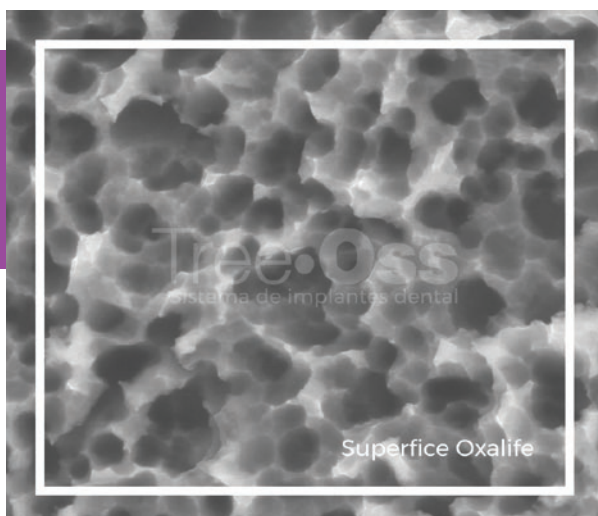

Con Oxalife® obtenga una oseointegración más profunda y resistente, aumente el porcentaje de contacto hueso-implante (BIC), y reduzca los tiempos de rehabilitación.


El tratamiento de superficie **Oxalife®** se logra mediante 3 procedimientos:

- Blasting** para macro rugosidad.
- Grabado ácido** para micro rugosidad.
- Tratamiento térmico** para una capa aumentada de óxido de titanio.


El resultado es una superficie altamente osteoconductiva.

GRAN CAPACIDAD DE HUMECTACIÓN - CAPILARIDAD

SUPERFICIE LISA SUPERFICIE OXALIFE




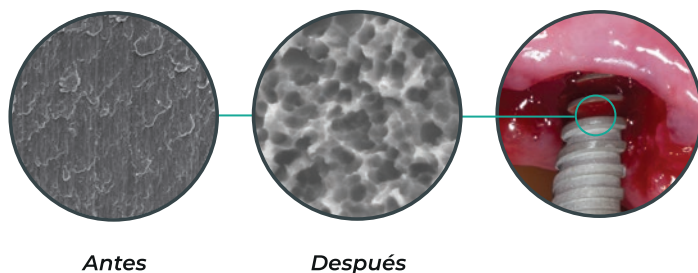


* Evaluación de la **tensión superficial** entre diferentes superficies de implantes dentales y agua.

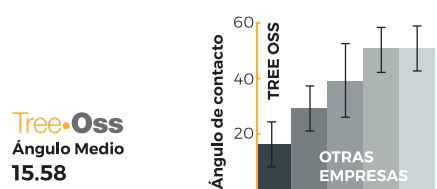

El equilibrio ideal entre **Rugosidad, Porosidad y Oxidación**

OTROS ESTUDIOS

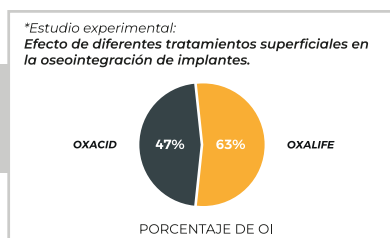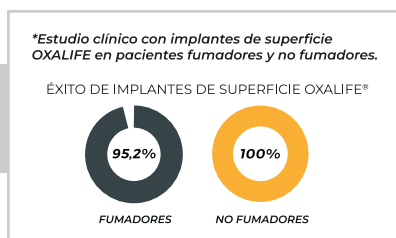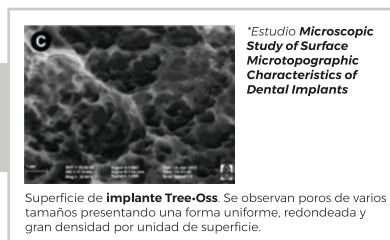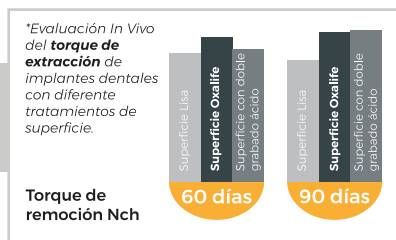



Tree•Oss
PROTOCOLOS


PROTOCOLO QUIRÚRGICO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES TREE•OSS® HS

Siga los pasos indicados a continuación prestando atención a las variaciones indicadas de acuerdo al **tipo de hueso**.


Las fresas indicadas como (op) "opcionales" deberán ser utilizadas **solo en caso** de que la densidad ósea sea **muy alta** con el objetivo de que el implante no tenga un torque de inserción superior a los 45 Ncm.

UTILIZANDO FRESAS CILÍNDRICAS


TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANGOSTO (NARROW)

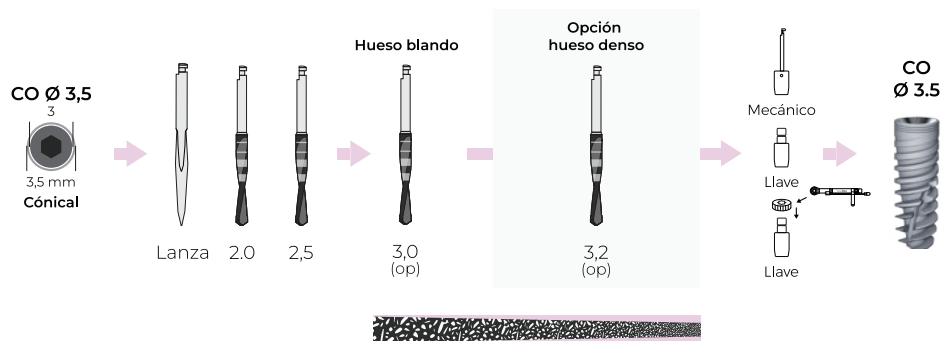


TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANGOSTO (NARROW)

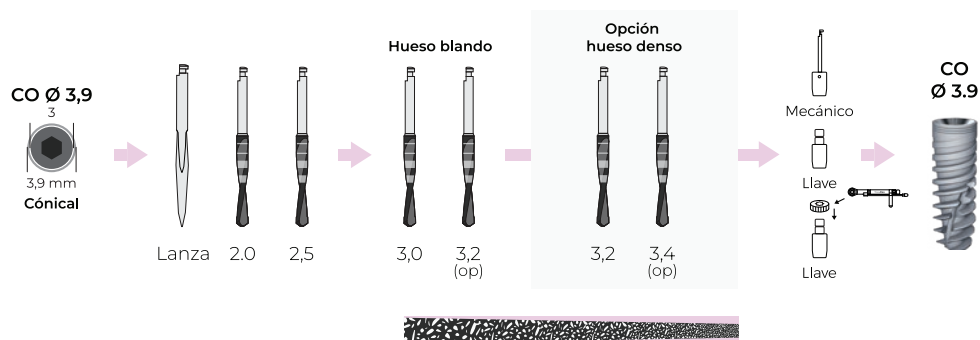

TREE•OSS® HS DIÁMETRO REGULAR (REGULAR)

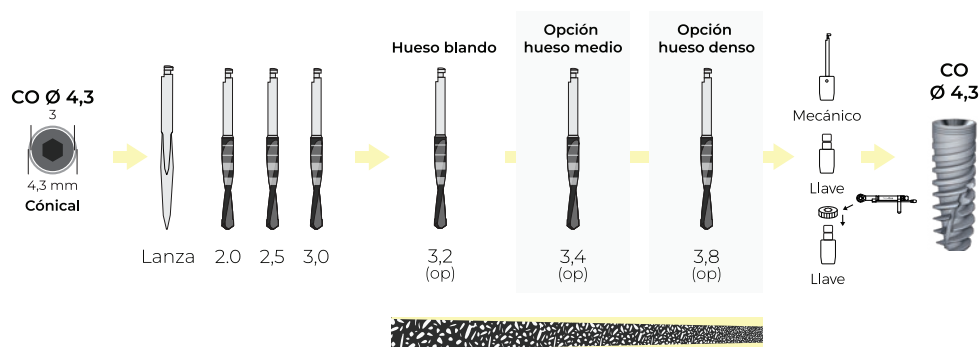

TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANCHO (WIDE)

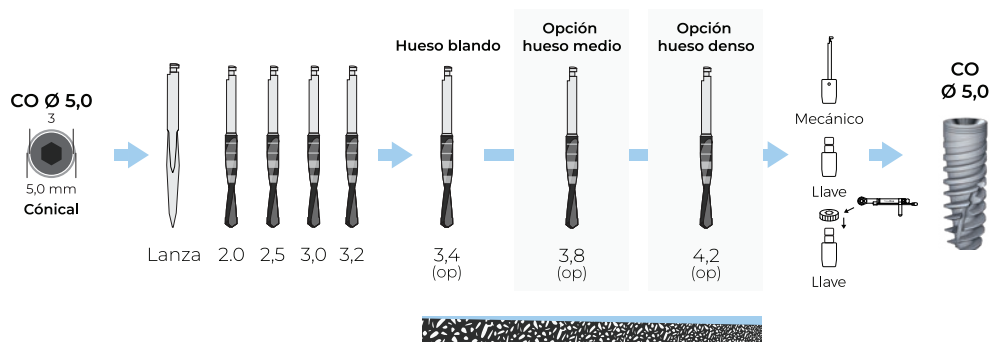

ALTO TORQUE PARA POST EXTRACCIÓN

HS

UTILIZANDO FRESAS ANATÓMICAS

TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANGOSTO (NARROW)



TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANGOSTO (NARROW)



TREE•OSS® HS DIÁMETRO REGULAR (REGULAR)



TREE•OSS® HS DIÁMETRO ANCHO (WIDE)



ALTO TORQUE PARA POST EXTRACCIÓN

HS

PROTOCOLO QUIRÚRGICO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES TREE•OSS® ANATOMIC

Siga los pasos indicados a continuación utilizando siempre **únicamente** la fresa del largo correspondiente al implante. El **código de color** le ayudará a identificar las fresas correctas.

El formador de rosca es de **uso opcional** solo en los casos donde la densidad ósea sea **muy alta** con el objetivo de que el implante no tenga un torque de inserción superior a los 45 Ncm.


TREE•OSS® ANATOMIC DIÁMETRO ANGOSTO (NARROW)



TREE•OSS® ANATOMIC DIÁMETRO REGULAR (REGULAR)



TREE•OSS® ANATOMIC DIÁMETRO ANCHO (WIDE)

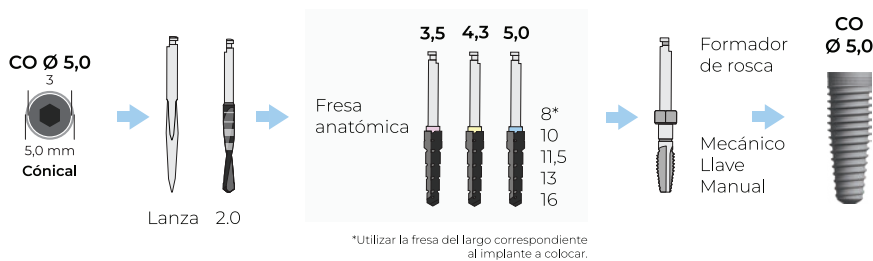

CARGA INMEDIATA PROBADA

ANATOMIC



Tree•Oss
Sistema de implante dental


**SISTEMA DE
PRÓTESIS CO**

SOLUCIONES **PROTÉSICAS**

Conexión cónica unificada con hexágono interno. Asegura un sellado perfecto y permanente a largo plazo.


Conexión cónica de 8 grados por lado. Brinda las bases para una emergencia firme, inmóvil y estética.

Plataform switch y cono morse. Disminuye la posibilidad de focos inflamatorios que impacten en la estabilidad biológica de los tejidos.

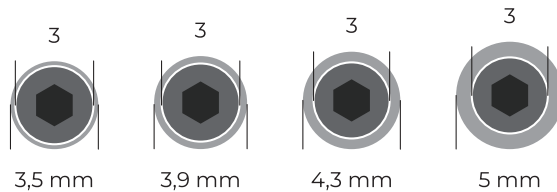

ANÁLOGO DE IMPLANTE

Fabricado en titanio.

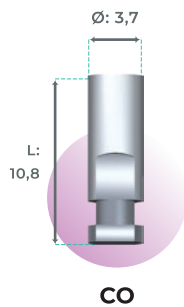


Referencia Análogo de implante CO




TORNILLO

Confeccionado en titanio. Hexagonal 0,050.

Hexagonal

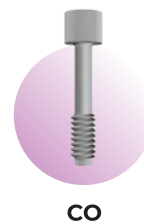


Referencia Tornillo CO

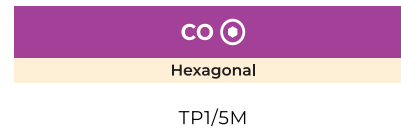


TRANSFER DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA

Fabricado en titanio, impresiones múltiples y unitarias. Tornillo con conexión hexagonal 0,050.

• • • **Cubeta abierta** • • •

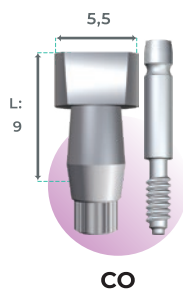

• • • **Cubeta cerrada** • • •

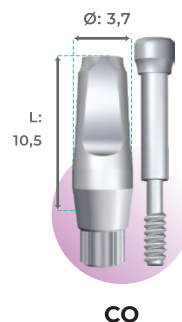


Referencias Transfer CO




TAPA DE CICATRIZACIÓN

Fabricado en titanio, distintos perfiles de emergencia, distintas alturas y con conexión hexagonal 0,050.

Cilíndrica CO

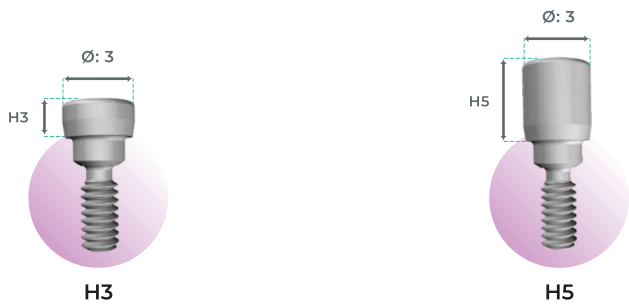

Expansiva CO

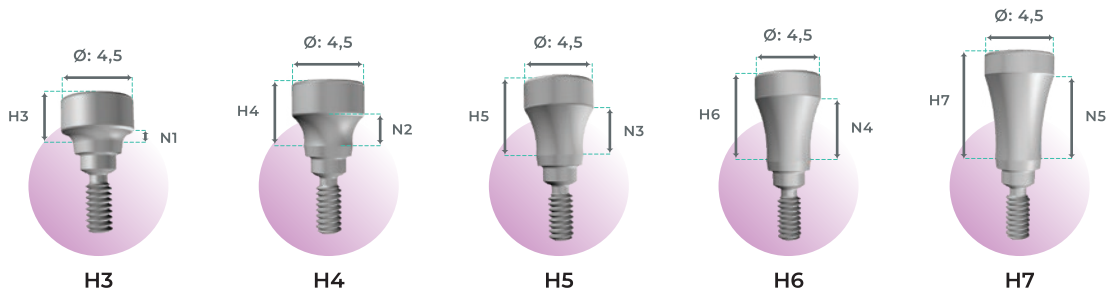


Referencias Tapa de cicatrización CO

CO 				
H3		Cilíndrica H5		
TCI3/5M		TCI5/5M		
N1 H3		N2 H4		Expansiva N3 H5
N4 H6		N5 H7		
TCE453/5M	TCE454/5M	TCE455/5M	TCE456/5M	TCE457/5M

Flujo digital CAD/CAM

ANÁLOGO DIGITAL

Diseñado para su uso en modelos fabricados en impresoras 3D y confeccionado en titanio.

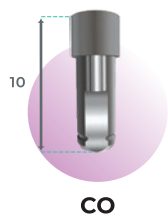


Referencia Análogo Digital CO

CO
ADI/5M

SCANBODY

Diseñado para ser utilizado en impresiones digitales gracias a su cuerpo de titanio radiopaco.

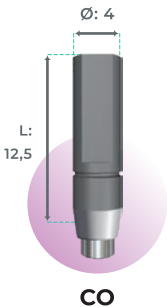


Referencia Scanbody CO

CO
TSC/5M



TI-BASE

Base de titanio utilizada para fabricar pilares personalizados mediante CAD/CAM. Incluye tornillo protésico y permite rehabilitar una o varias unidades.

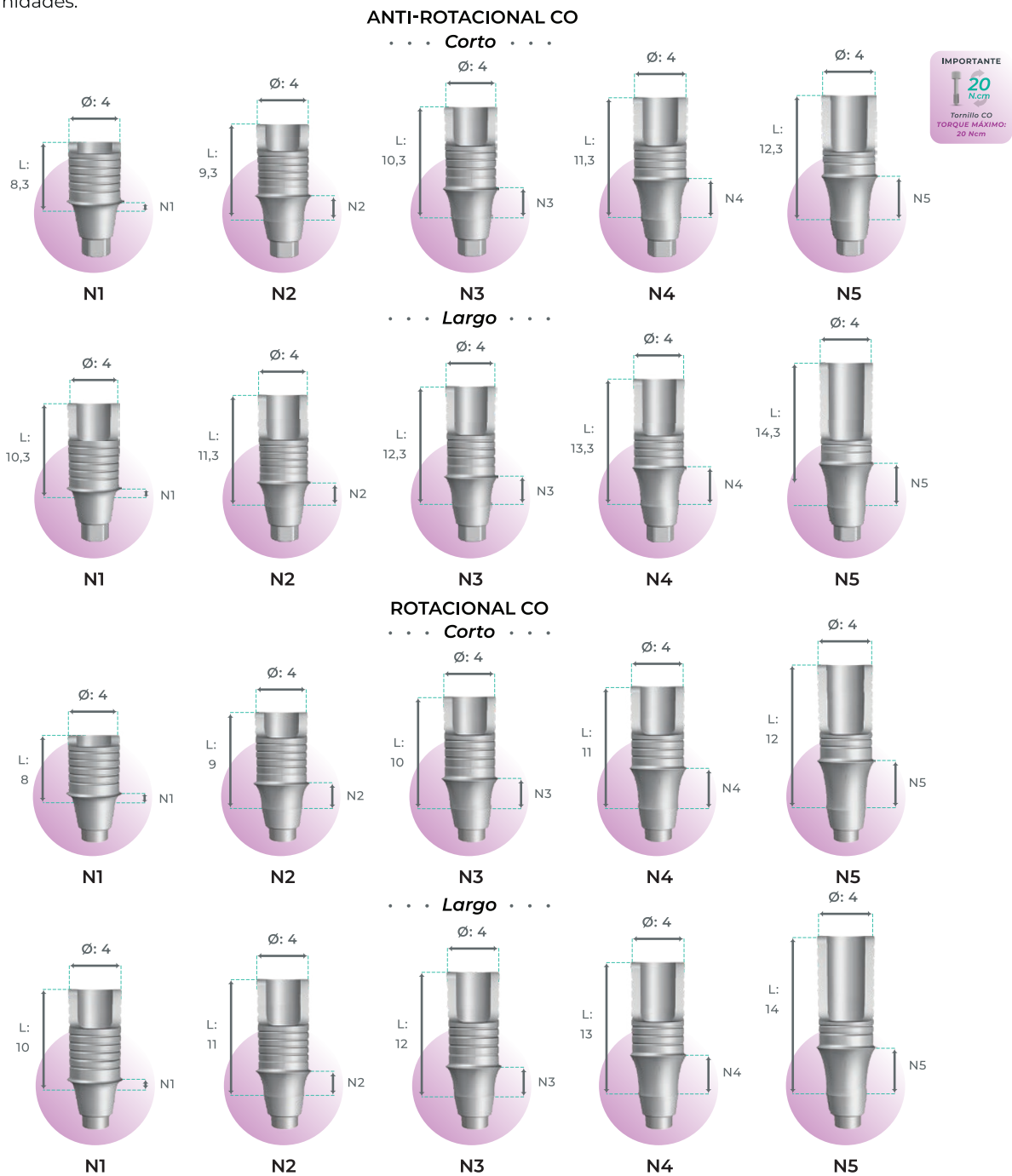

Referencias Ti-Base CO

co				
Anti-rotacional				
Corto				
N1	N2	N3	N4	N5
PTC1/5M	PTC2/5M	PTC3/5M	PTC4/5M	PTC5/5M
Largo				
N1	N2	N3	N4	N5
PTL1/5M	PTL2/5M	PTL3/5M	PTL4/5M	PTL5/5M
Rotacional				
Corto				
N1	N2	N3	N4	N5
PTCR1/5M	PTCR2/5M	PTCR3/5M	PTCR4/5M	PTCR5/5M
Largo				
N1	N2	N3	N4	N5
PTLR1/5M	PTLR2/5M	PTLR3/5M	PTLR4/5M	PTLR5/5M



**INGENIERÍA
PRECISA**
PARA TU
TRANQUILIDAD.

PILARES

Los pilares cumplen un rol fundamental en la rehabilitación oral con implantes, ya que actúan como el nexo entre el implante osteointegrado y la prótesis final. Su elección adecuada influye directamente en el éxito funcional, biológico y estético del tratamiento.


Existen distintos tipos de pilares según el caso clínico: rectos, angulados, personalizados (CAD/CAM), de cicatrización, de carga inmediata, y pilares múltiples, entre otros. Cada uno está diseñado para adaptarse a las necesidades anatómicas del paciente, al tipo de prótesis y a los requerimientos estéticos y mecánicos.

Una correcta adaptación pilar-implante favorece la estabilidad mecánica, reduce el riesgo de aflojamiento de tornillos y protege la integridad de los tejidos blandos. Además, la elevación de la interfaz protésica por encima del margen gingival disminuye la retracción de encías y mejora la higiene periimplantaria.

El uso de pilares adecuados asegura una distribución óptima de cargas, facilita los procedimientos clínicos y garantiza rehabilitaciones predecibles, estéticas y duraderas.

PILAR RECTO ESTÁNDAR

Fabricado en titanio. Permite ser tallado. Incluye tornillo protésico con conexión hexagonal 0,050.

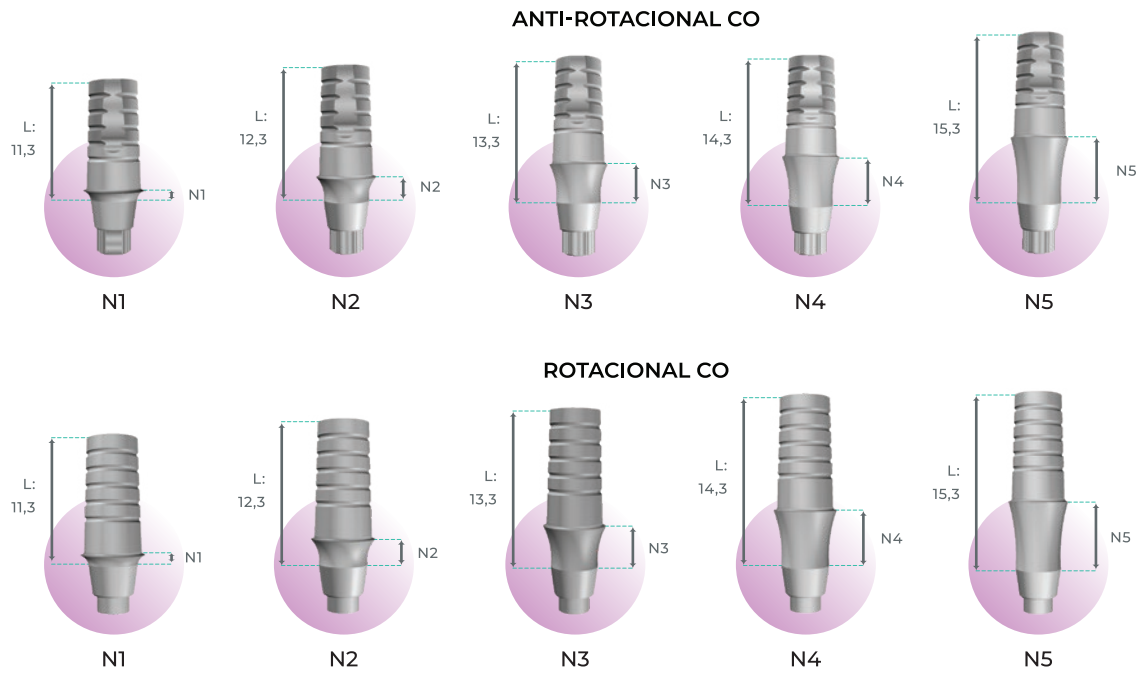


Referencia Pilar Recto CO

co				
Anti-rotacional				
N1	N2	N3	N4	N5
PRE1/5M	PRE2/5M	PRE3/5M	PRE4/5M	PRE5/5M

Rotacional				
N1	N2	N3	N4	N5
PRR1/5M	PRR2/5M	PRR3/5M	PRR4/5M	PRR5/5M

PILAR ESTÉTICO

Altura y espesor de paredes extendidos para un tallado versátil. Diseño de hombro estético más bajo para vestibular.

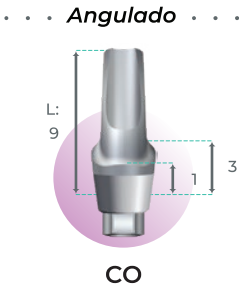


Referencia Pilar Estético CO

co
Angulado
PEA2/5M



UCLA CALCINABLE CON BASE DE CROMO

Diseñe un pilar a medida sin perder precisión ni adaptación en la conexión del implante. Incluye tornillo protésico con conexión hexagonal 0,050 o smart angle para las versiones anguladas.

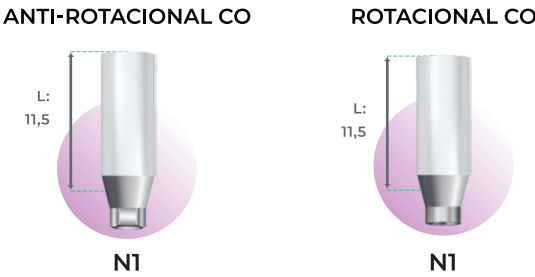

Referencias UCLA Base Cromo CO

co
Anti-rotacional
N1
UCAC1/5M


Rotacional
N1
UCRC1/5M



PILARES SOBREDENTADURA

PILAR BALL-ATTACHED

Confeccionado en titanio. El sistema O-Ring metálico proporciona una gran retención, convirtiéndolo en una solución fácil y económica. Realice el ajuste utilizando el destornillador para Ball-Attached.

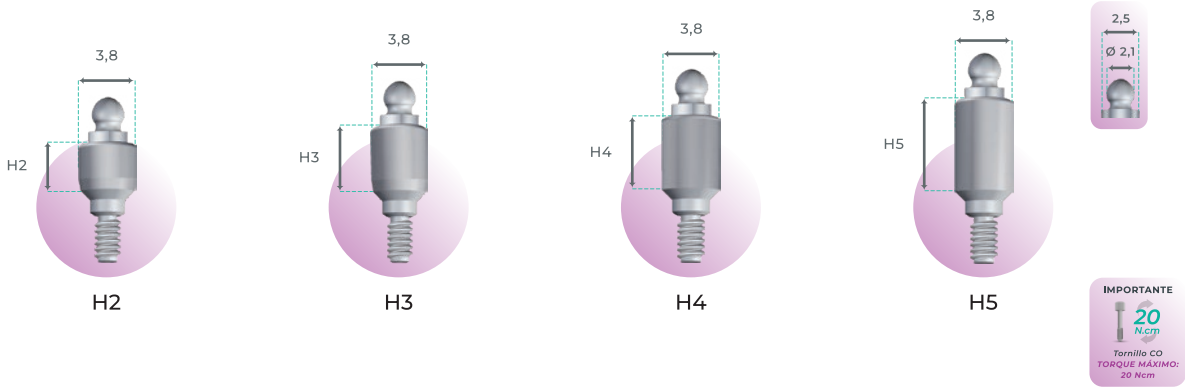


Referencias Pilar Ball-Attached CO

co			
H2	H3	H4	H5
BA2/5M	BA3/5M	BA4/5M	BA5/5M

TREE•OSS CATOR

El pilar **Tree•Oss® Cator** es ideal para restauraciones en sobredentaduras. Compatible con el pilar **LOCATOR®**. Gracias a su diseño permite alinear y asentar fácilmente las prótesis.

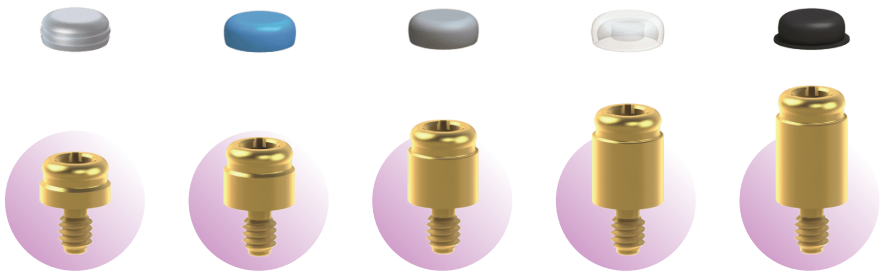

Referencias Cator CO

co				
H1	H2	H3	H4	H5
PSDCORH1	PSDCORH2	PSDCORH3	PSDCORH4	PSDCORH5


TODOS LOS PILARES INCLUYEN SU TORNILLO CORRESPONDIENTE

PRECISIÓN QUE SE SIENTE.
ESTABILIDAD QUE PERDURA.

SISTEMA DE PILAR MÚLTIPLE

PILAR MÚLTIPLE RECTO

Permiten la rehabilitación de casos con varios implantes, brindando la posibilidad de corregir diferentes alturas y alineaciones entre los distintos implantes.

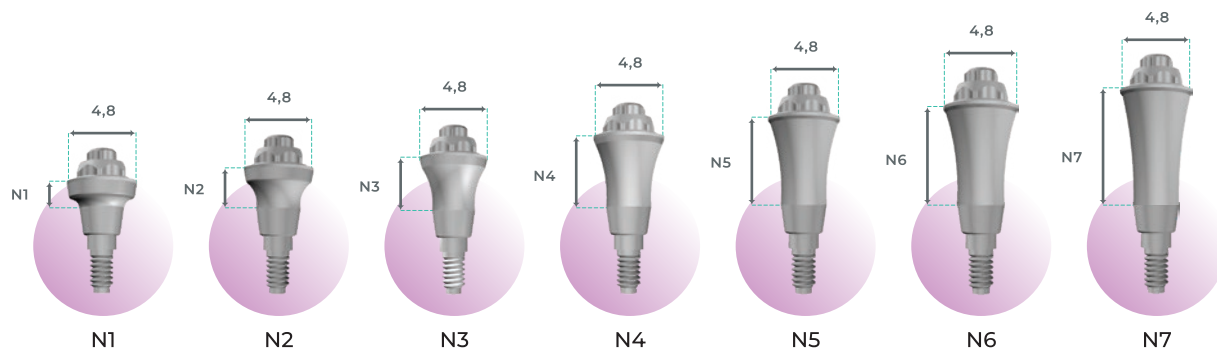


Referencias Pilar Recto CO

CO						
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
PM1/5M	PM2/5M	PM3/5M	PM4/5M	PM5/5M	PM6/5M	PM7/5M

PILAR MÚLTIPLE ANGULADO

Ideales para corregir diferencias de alineación entre implantes, realice el ajuste mediante el destornillador para Pilar Múltiple.

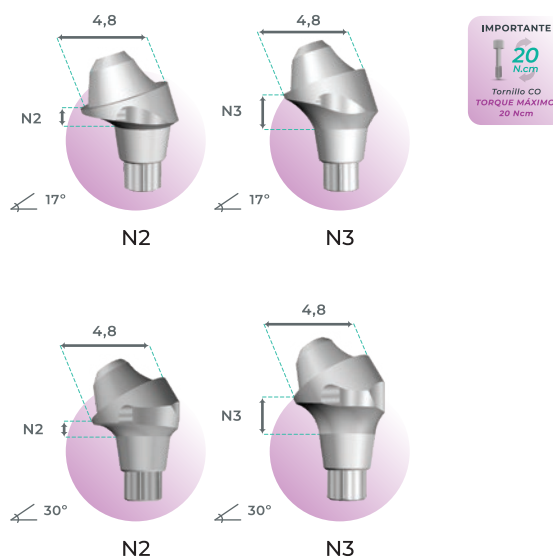


Referencias Pilar Múltiple Angulado CO

CO	
17 °	
N2	N3
PMA172/5M	PMA173/5M
30 °	
N2	N3
PMA302/5M	PMA303/5M

COMPONENTES PARA PILAR MÚLTIPLE


ANÁLOGO DE PILAR MÚLTIPLE

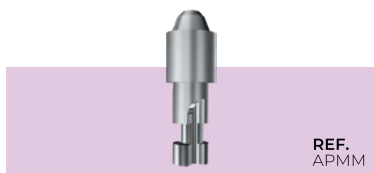


TAPA DE PROTECCIÓN PARA PILAR MÚLTIPLE



TRANSFER PARA PILAR MÚLTIPLE CUBETA ABIERTA

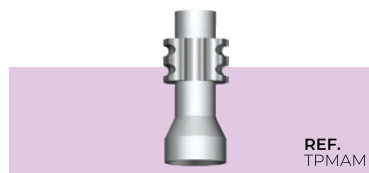

TRANSFER PARA PILAR MÚLTIPLE CUBETA CERRADA

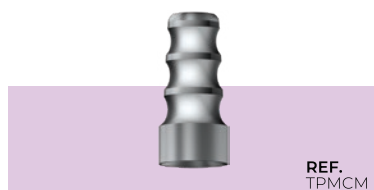

PILAR CALCINABLE CON BASE METÁLICA PARA PILAR MÚLTIPLE



PILAR CALCINABLE PARA PILAR MÚLTIPLE



PILAR PROVISORIO DE TITANIO PARA PILAR MÚLTIPLE



MICROTORNILLO PARA PILAR MÚLTIPLE



LLAVE PARA PILAR MÚLTIPLE



FLUJO DIGITAL P. MÚLTIPLE

ANÁLOGO DIGITAL PARA PILAR MÚLTIPLE



SCANBODY PARA PILAR MÚLTIPLE



TI-BASE LARGO PARA PILAR MÚLTIPLE



TI-BASE CORTO PARA PILAR MÚLTIPLE





Tree-Oss
Sistema de implante dental

ELEMENTAL KIT

Tree•Oss SURGICAL ELEMENTAL KIT



Permite la colocación de **implantes rectos y anatómicos**. Su diseño moderno y compacto, así como los materiales en los que está confeccionado, lo convierten en la **mejor elección para el profesional** que quiere tener siempre a mano lo elemental.

Tree-Oss® Elemental Kit Full es un exclusivo sistema quirúrgico que **permite colocar los diseños de implantes Tree-Oss® Rectos y Anatómicos, con un solo kit de diseño compacto y ergonómico**.

En el sector superior del kit se encuentran los componentes de colocación más utilizados.

Incluye una llave torquímetro para asegurar un correcto anclaje inicial.

En el sector derecho se encuentran las fresas anatómicas más utilizadas para la colocación de implantes **Tree-Oss® Anatómicos**.

En el sector izquierdo las fresas rectas para la colocación de implantes **Tree-Oss® Rapid, Tree-Oss® Simple y Tree-Oss® HS**.


En un **diseño compacto y ergonómico** encuentre todos los instrumentos necesarios para realizar cualquier cirugía de implantes.

El **box** es confeccionado en **materiales plásticos aprobados para usos médicos, autoclavable** y con un diseño **moderno, liviano y muy resistente**.

Todas las **fresas** incluidas poseen **recubrimiento de carbono DLC** ampliamente probado que mantienen un **filo excelente** aún con cientos de usos.




CONFIGURACIÓN SURGICAL ELEMENTAL KIT

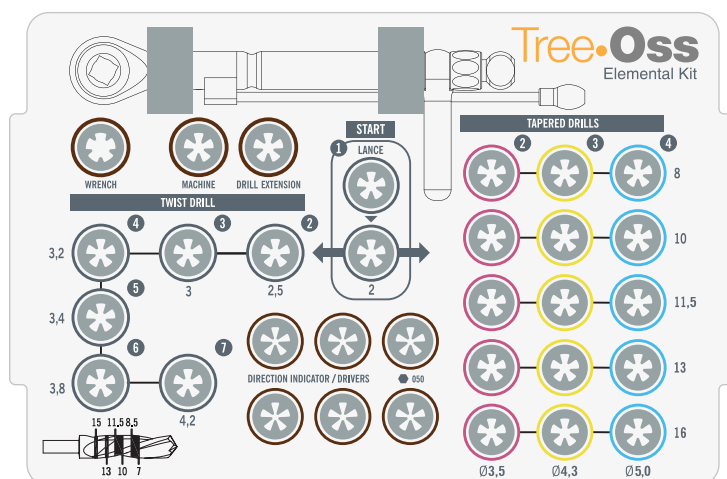


El Tree Oss® Surgical Elemental Kit viene en varias configuraciones:

TREE-OSS® SURGICAL ELEMENTAL KIT FULL

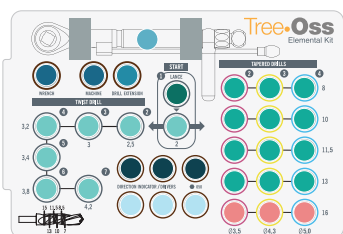


- Fresa Lanza DIAMOND.
 - Fresas anatómicas DIAMOND
 - Ø3,5 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Ø4,3 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Ø5,0 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Fresas rectas DIAMOND
 - Ø2 - Ø2,5 - Ø3 - Ø3,2 - Ø3,4 - Ø3,8 - Ø4,2
 - *Op. Formadores de rosca rectos
 - Ø3,5 - Ø3,75 - Ø5,0
 - Paralelizadores (2)
 - Insertos
 - mecánico / llave
 - Prolongador de fresa
 - Llave Torquímetro
 - Destornilladores
 - 0,035 / 0,050
- BOX QUIRÚRGICO ELEMENTAL KIT

TREE-OSS® SURGICAL ELEMENTAL KIT ANATÓMICO

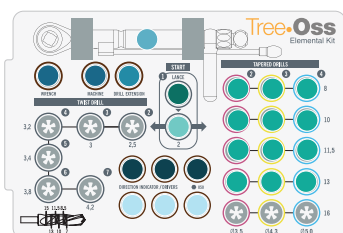

- Fresa Lanza DIAMOND
 - Fresas anatómicas DIAMOND
 - Ø3,5 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Ø4,3 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Ø5,0 x 8 - 10 - 11,5* - 13
 - Fresa recta DIAMOND Ø2
 - Insertos
 - mecánico / llave
 - Prolongador de fresa
 - Llave Torquímetro
 - Destornilladores
 - 0,035 / 0,05
- BOX QUIRÚRGICO ELEMENTAL KIT

TREE-OSS® SURGICAL ELEMENTAL KIT RECTO

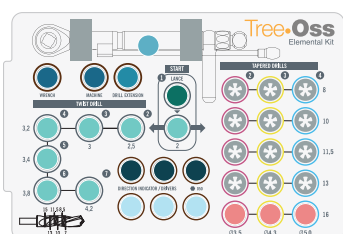

- Fresa Lanza DIAMOND
 - Fresas rectas DIAMOND
 - Ø2 - Ø2,5 - Ø3 - Ø3,2 - Ø3,4 - Ø3,8 - Ø4,2
 - *Op. Formadores de rosca recto
 - Ø3,5 - Ø3,75 - Ø5,0
 - Paralelizadores (2)
 - Insertos
 - mecánico / llave
 - Prolongador de fresa
 - Llave Torquímetro
 - Destornilladores
 - 0,035 / 0,050
- BOX QUIRÚRGICO ELEMENTAL KIT

INSTRUMENTAL

Tree-Oss Premium Plus Kit

El **Premium Plus Kit Tree-Oss®** es un exclusivo sistema quirúrgico que permite colocar todos los diseños de implantes **Tree-Oss®** anatómicos y rectos con un solo kit de diseño compacto y ergonómico. En el sector derecho del kit se encuentran las fresas anatómicas para la colocación de implantes **Tree-Oss® Anatomic** y en el sector izquierdo las fresas rectas para la colocación de implantes **Tree-Oss® Rapid**, **Tree-Oss® HS** y **Tree-Oss® Simple**.



Tree-Oss Elemental kit

El **Tree-Oss® Elemental Kit** permite la colocación de implantes rectos y cónicos. Su diseño moderno y compacto así como los materiales en los que está confeccionado lo convierten en la mejor elección para el profesional que quiere tener siempre a mano lo elemental.



Tree-Oss Prosthetic kit

El **Tree-Oss® Prosthetic Kit** contiene todos los instrumentos necesarios para la rehabilitación de implantes **Tree-Oss®** con cualquier técnica protésica, incluye destornilladores de diferentes conexiones y largos para que pueda realizar cualquier procedimiento protésico.

Utilice el mango para tallar cualquier pilar colocándole un análogo digital como soporte.



Tree-Oss Fresas Laser Diamante

Todas las fresas **Tree-Oss®** están confeccionadas en una **exclusiva aleación de acero inoxidable** con un novedoso tratamiento de dureza y recubiertas con carbono. Dichos procesos de fabricación garantizan un excelente filo, lo que reduce notablemente la generación de calor en el hueso, y una alta resistencia al uso.



Tree•Oss

LA **SOLUCIÓN** IMPLANTOLÓGICA

Tree•Oss Ibérica

918 324 611
C/ del Guadalquivir, 8 posterior
28823 Coslada, Madrid.

info@treeossiberica.es
www.treeossiberica.es



facebook.com/treeossiberica



instagram.com/treeossiberica.es



youtube.com/treeossargentina

