

**PRODUCT
LINE**

Tree•Oss
Dental Implant System

Tree•Oss CERAMIC

IMPLANTE DE ZIRCONIA DE UNA Y DOS PIEZAS
ONE AND TWO PIECE ZIRCONIA IMPLANT




Ø: 3,5 - 4,3
L: 10 - 13

INNOVACIÓN Y ALTA ESTÉTICA
INNOVATION AND HIGH ESTHETICS

Fabricados en Zirconia pura (ZrO₂) mediante tecnología CIM (Ceramic Injection Moulding) brindan una estética sin igual, excelente biointegración y una asombrosa resistencia mecánica (1200 MPA).

Manufactured with pure Zirconia (ZrO₂) using CIM (Ceramic Injection Moulding) technology, thus providing unique esthetics, excellent biointegration and amazing mechanical resistance (1200 MPA).

Z-Life:

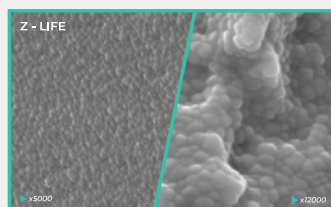

Microscopías Electrónicas de Barrido (SEM) y Fuerza atómica (AFM) - Superficies macro, micro y nano de los sistemas de implantes Tree-Oss® Ceramic.

Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM). Macro, micro and nano surfaces of the Tree-Oss® Ceramic implant systems.


Provee un equilibrio perfecto entre porosidad y humectabilidad, que aloja los factores de crecimiento e induce la formación ósea.

Provides the perfect porosity - wettability balance that hosts growth factors and promotes bone formation.

Tree•Oss HS

HIGH STABILITY IMPLANT

IMPLANTE ESPIRAL AUTOPERFORANTE DE ALTA ESTABILIDAD INICIAL
SELF-DRILLING THREADED IMPLANT WITH HIGH INITIAL STABILITY

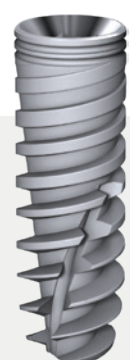

IH



CI



CO

Ø: 3,7 - 4,3 - 5

L: 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Ø: 3,5 - 4,3 - 5

L: 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

Ø: 3,5 - 3,9 - 4,3 - 5

L: 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

CO

Conexión cónica unificada
Unified conical connection


Diseño de doble espira gradual, cuerpo cónico autoperforante. Excelente anclaje inicial en todos los casos.

Double gradual threads, self-drilling tapered body. Excellent initial anchorage in every case.

ALTO TORQUE PARA TRATAMIENTOS INMEDIATOS
HIGH TORQUE FOR IMMEDIATE TREATMENTS

Tree•Oss ANATOMIC

IMPLANTE CÓNICO QUE IMITA A LA RAÍZ NATURAL
TAPERED IMPLANT THAT MIMICS THE NATURAL TOOTH ROOT

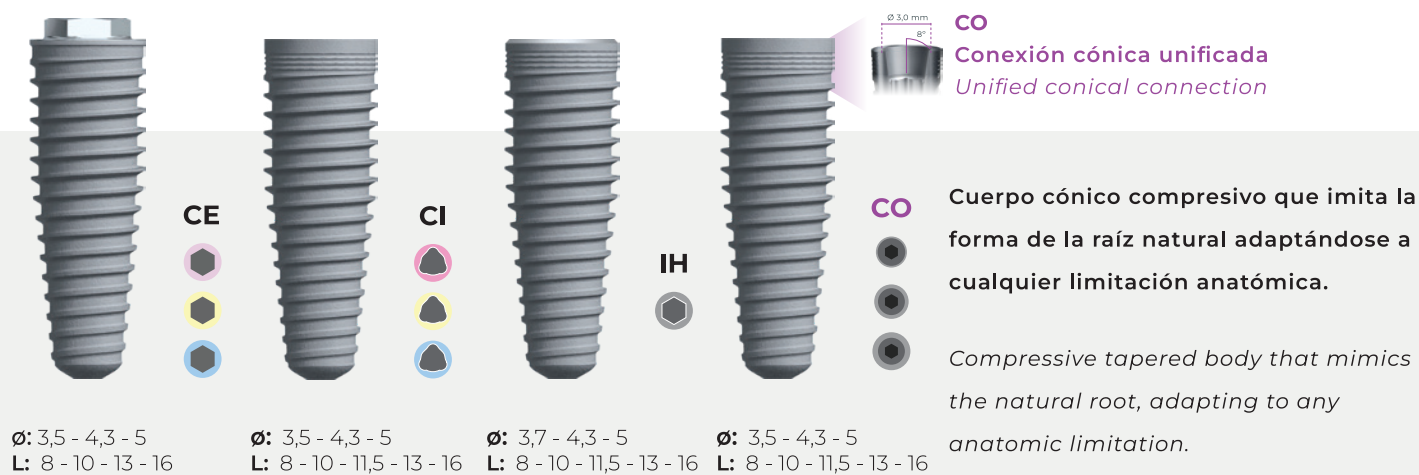

FACILIDAD PROBADA
PROVEN EASE

Tree•Oss SIMPLE

IMPLANTE SEMI-CÓNICO AUTORROSCANTE
SEMI-TAPERED SELF-TAPPING



SIMPLEZA Y VERSATILIDAD
SIMPLICITY AND VERSATILITY

Tree•Oss RAPID


IMPLANTE CILÍNDRICO CON ÁPICE CÓNICO
CYLINDRICAL IMPLANT WITH TAPERED APEX



DISEÑO PROBADO Y PREDECIBLE
PROVEN AND PREDICTABLE DESIGN



OXALIFE®

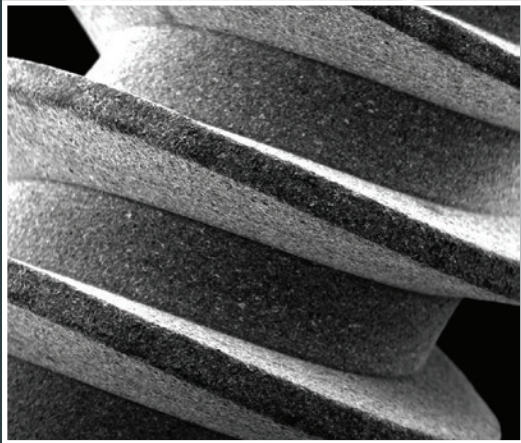

Rugosidad y porosidad ideal para una óptima respuesta biológica. Capa de óxido y humectabilidad aumentadas para una oseointegración rápida y confiable.

- Arenado
- Grabado ácido
- Tratamiento térmico y oxidación


Ideal roughness and porosity for optimal biologic response. Augmented oxidized layer and wettability for quick and reliable osseointegration.

- Sand blasting
- Acid Etching
- Thermal Treatment and oxidizing


GRAN CAPACIDAD DE HUMECTACIÓN - CAPILARIDAD GREAT WETTABILITY - CAPILLARITY

SUPERFICIE LISA
SMOOTH SURFACE

SUPERFICIE OXALIFE
OXALIFE SURFACE

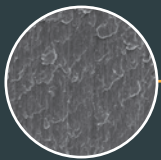

Antes
Before

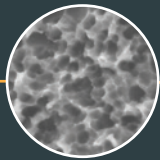

Después
After



El equilibrio ideal entre **Rugosidad, Porosidad y Oxidación.**
*The ideal balance between **Roughness, Porosity and Oxidizing.***


*Evaluación de la **tensión superficial** entre diferentes superficies de implantes dentales y agua.

* Evaluation of **surface tension** between different dental implant surfaces.

Tree-Oss

Ángulo Medio
15.58

Medium Angle
15.58

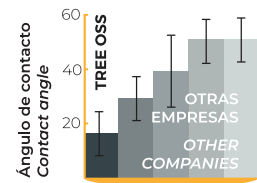

PILAR MULTIFUNCIÓN / MULTI-FUNCTION ABUTMENT

TODOS LOS IMPLANTES TREE-OSS® INCLUYEN SU EXCLUSIVO PILAR MULTIFUNCIÓN QUE LE PERMITE:
ALL THE TREE-OSS® IMPLANTS INCLUDE THE EXCLUSIVE MULTI-FUNCTION ABUTMENT THAT ALLOWS FOR:

- Colocación del implante •
- Toma de impresiones •
- Provisionalización •
- Ti-Base •



- Implant placement
- Impression taking
- Provisionalization
- Ti- Base

CAD - CAM

Utilice el Pilar multifuncion como TI-BASE.
Descargue la librería digital y diseñe coronas que ajusten perfectamente sin costo adicional.

*Use the Multi-function Abutment as **TI-BASE.**
Download the digital library and design perfectly adjusting crowns without additional costs.*



CORONA
CROWN

INCLUIDO CON TODOS LOS IMPLANTES*
INCLUDED WITH ALL IMPLANTS*




PILAR
MULTIFUNCIÓN
MULTI-FUNCTION
ABUTMENT

TAPA
CAP

TORNILLO
PROTÉTICO
PROSTHETIC
SCREW

* Excepto en implantes Tree-Oss® CERAMIC.
* Except for Tree-Oss® CERAMIC.

Nuestra librería digital: tree-oss.com/descargas
Our digital library: tree-oss.com/downloads

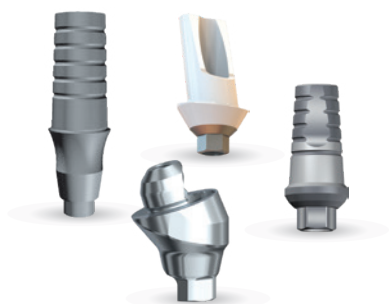

Amplia y completa variedad de aditamentos protésicos para la realización de **cualquier** rehabilitación sobre implantes.

Wide and complete variety of prosthetic attachments to manufacture any Implant-supported restoration.

ESPAÑOL
Para más información
escanée el código QR.



ENGLISH
For additional info
please scan QR code.



DISEÑOS CAD-CAM INTEGRADOS: INTEGRATED CAD-CAM DESIGNS:



DIGITAL
ANALOG



SCANBODY



TI-BASE

Tree•Oss GUIDED KIT



CAD-CAM

Diseñado para **simplificar al máximo** la cirugía guiada.
Fresas anatómicas con **recubrimiento de carbono**.

Mínimos pasos quirúrgicos sin reductores ni procedimientos complejos.

FÁCIL – RÁPIDO – ÁGIL – INTUITIVO

*Designed to **simplify** guided surgery.*

Carbon-coated anatomic drills.

Minimum surgical steps, reducer and complex procedures free.

EASY – QUICK – AGILE – INTUITIVE





Tree•Oss KITS

Una opción para cada tratamiento y profesional.
An option for every treatment and professional.



Tree•Oss DIAMOND DRILLS

Todos los kits Tree-Oss® incluyen fresas con el exclusivo recubrimiento de carbono DLC (diamond like carbon) que brinda una alta dureza con una gran resistencia a la corrosión. Colocación de cientos de implantes sin perder precisión.

*All the Tree•Oss® kits include drills with the exclusive **DLC (diamond-like-carbon) carbon coating**, that provides great hardness with great resistance to corrosion. Placement of hundreds of implants without losing precision.*



Tree-Oss Ibérica SL C/Guadalquivir 8 posterior 28823 Coslada - Madrid

Oficina: +34 918 324 611 / Whatsapp: +34 605 144 433 / info@treeossiberica.es

